



| Produktový list |

Comfort Care (Delta ®)

Antidekubitní matrace Matrace pro domácí péči

Vysoce komfortní antidekubitní matrace

Uplatnění



Nemocnice, pečovatelské domy

Složení výrobku

- třívrstvé pěnové jádro:
 - *tuhá spodní vrstva
 - *pružná prostřední vrstva s profilováním v oblasti ramen, pánve a pat zabraňující vzniku proleženin
 - *měkká horní vrstva zajišťující nejvyšší pohodlí
- nylonový potah s polyuretanovým zátěrem pružný v obou směrech
- všechny spoje jsou vysokofrekvenčně svařované
- varianta Delta ® má speciální patentovaný zip

Výhody

- prevence vzniku proleženin:
 - *nejvyšší povrchové zatížení < 60mmHg
 - *průměrné zatížení < 20 mmHg
- vysoká prodyšnost potahu
- voděodolný potah
- nepropustný zip (u verze Delta ®)

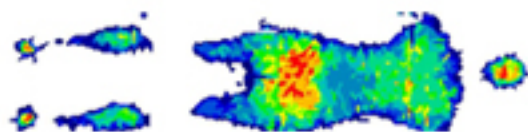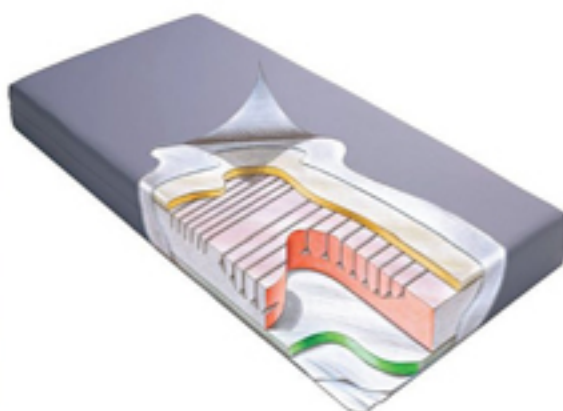

Tlaková mapa pacienta 178cm/80kg po 20min ležení

Čištění

- prostým otřením běžným PH-neutrálním čisticím prostředkem
- povrchová desinfekce 70% lihovým přípravkem
- varianta matrace s patentovaným zipem Delta ® zaručuje 100% nepropustnost pro bakterie
- možno čistit v autoklávu



Rozměry

- výška matrace 140 mm
- dle požadavku



Označení výrobku

Comfort Care (Delta ®)

