



| Produktový list |

Matrace DEKU STAR

Antidekubitní matrace

Vysoce kvalitní antidekubitní matrace pro mobilní pacienty

Uplatnění

Matrace Deku Star je antidekubitní matrace pro použití v nemocnicích a pečovatelských ústavech

Složení výrobku

- celková výška matrace 14cm:
 - *3 cm vysoká spodní vrstva tuhé PUR pěny
 - *8 cm vysoká vrstva profilované polyuretanové studené pěny
 - *3 cm vysoká vrstva viskoelastické polyuretanové pěny
- zpevněné boky
- potah z polyesterové tkaniny se zátěrem

Výhody



- horní vrstva z viskoelastické pěny pomáhá velmi dobře roznášet tlak ležícího pacienta
- preventivně proti vzniku dekubitů působí i pěnové jádro z velmi pružné pěny se speciálním antidekubitním profilem
- spodní tuhá vrstva prodlužuje životnost matrace
- boky z tuhé pěny usnadňují vstávání z postele
- pružný, voděodolný a prodyšný potah
- snadná údržba potahu, lze prát

Rozměry

- 2000 x 900 x140 mm
- jiné rozměry dle požadavku

Označení výrobku

Deku Star

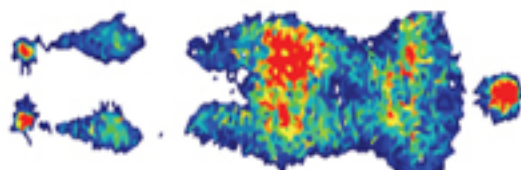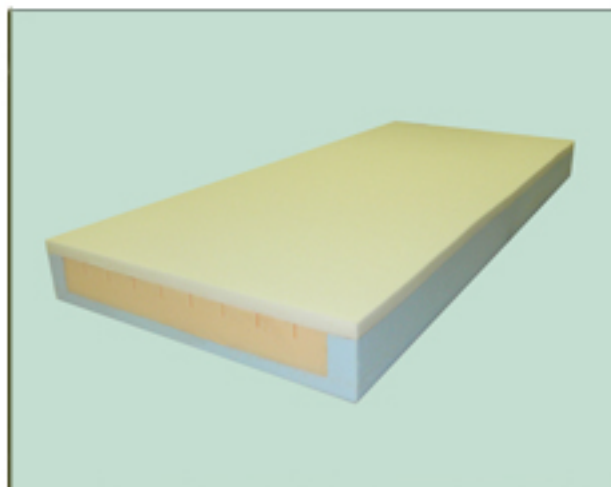

Tlaková mapa pacienta 178cm/92kg po 20min ležení

Další možnosti

- snížení hořlavosti užitím pěny splňující normu European Standard BS 5852 Crib 5
- spodní vrstva potahu s protiskluzovou úpravou
- svařovaný potah



foam
for care